

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate korisnička uputstva koja su priložena uz proizvod, kao i da se pridržavate navedenih preporuka.

Waterpik Inc tvrdi da ovaj proizvod nema mane u materijalu i načinu sklapanja u roku od 2 godine od datuma nabavke. ukoliko proizvod nije nepravilno upotrebljen ili fizički oštećen posle nabavke.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Proizvod koji ne bude popravljen u propisanom roku na vaš zahtev zameničemo novim. Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobraznosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

POSTUPAK REKLAMACIJE:

Ako proizvod koji ste kupili nije saobrazan Ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste proizvod kupili.


Prodavac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjavaње o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti je moguće opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Saobraznost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

- nepoštovanja uputstva za upotrebu,
- nepravilna upotreba i održavanje aparata,
- oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika ili oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem, popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
- ugradnja neoriginalnih rezervnih delova,
- nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
- oštećenja nastala zbog mehaničkih udara od strane kupca ili treće osobe,
- grešaka koje su posledica smetnji iz okoline (udar грома, električne struje, poplave i sl.).

RECIKLAŽA

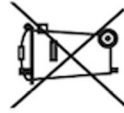

- Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.

- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Ekskluzivni distributer za Srbiju: LAVIEFARM DOO, ul. Zrmanjska 41, 11 000 Beograd

tel: +381 11 744 0646, +381 11 744 0698; fax: +381 11 782 3133


e-mail: info@waterpik.rs

Sertifikati usaglasnosti: www.waterpik.rs/dokumenti



Datum kupovine: _____

Waterpik Ultra Water Flosser Model WF-100 / WF-112

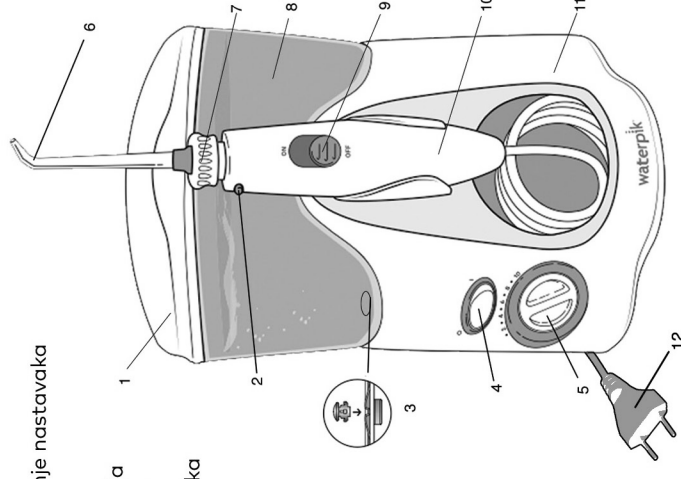

1. Poklopac rezervoara / mesto za skladištenje nastavka
2. Dugme za izbacivanje nastavka
3. Gumica / ventili za rezervoar
4. Dugme za uključivanja / isključivanje uređaja
5. Toččić za kontrolu vodenog pritiska (2-10)
6. Nastavak
7. Okretno dugme za kontrolu smeru nastavka
8. Rezervoar (651ml)
9. Dugme za uključivanje/isključivanje vode
10. Ručica
11. Baza
12. Utičnica za struju

Specifikacija proizvoda

Pritisak: 0,689 do 6,895 bar

Impulsa u minuti: 14-00

Nivoa podešavanja pritiska: 10

Kapacitet rezervoara: 651 ml

Dimenzije uređaja: 25,15 x 14,22 x 13,46 cm

Težina uređaja: 0,671 kg

Napon: 220-240V

1. Oprema koja se dobija uz Waterpik Ultra Water Flosser:




JT-100E – Waterpik® Classic Jet Tip (klasična cevčica za ispiranje, 2 komada)

OD-100E – Waterpik® Orthodontic Tip (ortodontski nastavak za ispiranje, 1 komad)

PS-100E – Waterpik® Plaque Seeker® Tip (čistač plaka, 1 komad)

PP-100E – Waterpik® Pik Pocket™ Tips (nastavak za čišćenje paradontalnih džepova, 1 komad)

TC-100E – Waterpik® Tongue Cleaner Tip (nastavak za ispiranje jezika, 1 komad)

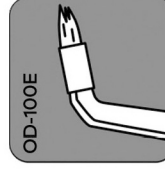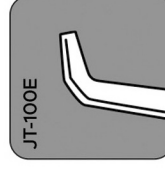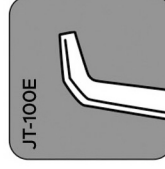

Nastavke potrebno zameniti novim na 3 do 6 meseci.

Svu dodatnu opremu za Waterpik aparate pronađite na:
www.waterpik.rs

UPUTSTVO ZA UPOTREBU APARATA Waterpik Ultra Water Flosser WF-100 / WF-112

Waterpik Ultra oralni tuš klinički je testiran i dokazano je da je ovaj proizvod neprevaziđen u svojoj sposobnosti da masira desni i čisti teško dostupna mesta u ustima. Takođe je naučno dokazano da pomaze održavanju zdravlja vaših zuba i desni i smanjuje bakterije iz onih delova usta koja normalno pranje i duugo čišćenje ne može da dosegne.

- Upotrebljavajte ovaj proizvod samo kako je naznačeno u ovom uputstvu i preporučeno od vašeg stomatologa.
- Ako vam je vaš doktor ili kardiolog savetovao da uzimate antibiotike pre zubnog tretmana, konsultujte vašeg stomatologa pre upotrebe ovog uređaja.

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su dobili nadzor ili uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane lica odgovornih za njihovu bezbednost.
- Uredaj mogu koristiti deca uzrasta 8+ godina, uz preporuku stomatologa.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

VAŽNO - PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA.

- Ovaj proizvod je za upotrebu u domaćinstvu.
- Kada koristite električne proizvode, posebno kada su deca prisutna, zbog bezbednosti uvek treba poštovati mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

OPASNOST:

Da bi se smanjio rizik od strujnog udara:

- Nemolje rukovati ulikacem mokrim rukama.
- Ne koristiti tokom kupanja.
- Nemolje stavljati ili skladištiti proizvod tamo gde može pasti ili biti uvučen u kadu ili lavabo.
- Nemolje posezati za proizvodom koji je pao u vodu. Odmah isključite.
- Proverite da li je kabl za napajanje oštećen pre prve upotrebe i tokom živотног века proizvoda.

UPOTREBNE:

Da biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili povrede:

- Ne uključite ovaj uređaj u sistem napona koji se razlikuje od naponskog sistema navedeno na uređaju ili punjaču. Korišćenje sa neodgovarajućim naponom će oštetiti proizvod i PONIŠTITI garanciju.
- Ne usmeravajte vodu ispod jezika, u uho, nos ili druga osetljiva područja. Ovaj proizvod je sposoban za proizvodnju pritiska koji može izazvati ozbiljnu štetu na ovim delikatnim područjima i sluzokoži.
- Nemolje ispušati ili umetati bilo kakav strani predmet u bilo koji otvor aparata ili u crevo.
- Držite električni kabl dalje od zagrejanе površine.
- Koristite samo preporučene savete za korišćenje i dodatke za uređaj koje je napravio Waterpik Inc.
- Nemolje koristiti pod ili koncentrisana električna ulja u ovom proizvodu jer njihova upotreba može smanjiti performanse uređaja i skratiti vek trajanja proizvoda. Upotreba ovih proizvoda mogu PONIŠTITI garanciju.
- U rezervoar uređaja sipajte isključivo vodu.
- Uklonite sav oralni nakit pre upotrebe ovog proizvoda.
- Nemolje koristiti ovaj proizvod duže od 5 minuta u svakom dvočasovnom periodu.
- Uredaj će se automatski isključiti nakon 5 minuta kontinuirane upotrebe.
- Kabi za napajanje se ne može zaminiti. Ako je gajtan oštećen, uređaj treba odložiti.
- Nemolje koristiti uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen, ili pao u vodu.

SERVIS

Elektroni deo Waterpik uređaja, uključujući i strujni kabl, može se servisirati samo kod ovlašćenog serviser a i preko distributera, kućne popravke nisu moguće. **U slučaju da aparat ne radi ili loše funkcioniše, vratite ga prodavcu, na prodajnom mestu na kom ste kupili proizvod.**

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Napunite rezervoar rastvorom vode i alkohalnog sirčeta (10:1), ostavite rastvor u rezervoaru 10ak minuta a zatim usmerite ručicu sa nastavkom u umivaonik, uključite aparat i pustite da sva voda iz rezervoara iscuri. Ovo će ukloniti tragove kalcijuma i omogućiti dug životni vek aparata. **Uklonite nastavak sa ručice i stavite ga u mesto za čuvanje.** Koristeci meku krpu i mekabravni čistač, očistite aparat kad je potrebno.

- Pre čišćenja, isključite aparat iz struje.
- Ispraznite rezervoar dok ne bude potpuno prazan, pre nego ga izložite niskim temperaturama.

INSTRUKCIJE ZA RUKOVANJE

- Waterpik Ultra oralni tuš je model aparata koji radi na struju.

UPOTREBA Waterpik Ultra oralnog tuša


- Uklonite rezervoar sa baze. Napunite ga vodom sobne temperature. Stavite rezervoar preko baze, upotrebljavajući gumeni deo na bazi kao pozicioner za rezervoar.
- Izaberite nastavak. Gumni nastavak u otvor na vrhu ručice dok ne klikne. Ne ispušajte ili gurajte bilo kakav strani objekat u bilo koji otvor ili crevo.
- Okrenite dugme za kontrolu pritiska koje se nalazi na aparatu, na najmanje (na 1 ili 2) prilikom prvog korišćenja aparata. Tokom upotrebe vremenom povećavajte pritisak dok ne nadete najbolju jačinu za vas. Ako osetite bol ili primatite krvarenje, smanjite pritisak na nivo koji vam odgovara.
- Stavite nastavak u usta i usmerite prema zubima. Nagните se preko umivaonika sa usnama blago zatvorenim oko prskalice. Sa slobodnom rukom uključite 0/1 prekidač. Maz iz prskalice će krenuti za sekundu. Možete privremeno zaustaviti maz pritiskajući dugme za pauzu na ručici.
- Usmerite maz duž desni pod pravim uglom skoro dodirujući zube. Pustite da voda teče iz vaših usta u umivaonik. Sistematski usmeravajte maz oko gornjih i donjih zuba, sa pauzom da očistite prostor između zuba. Pazite da ne usmerite vodu ispod jezika, u uho, nos ili drugo delikatan područje. Ovaj proizvod može prouzrokovati pritisak koji može dovesti do ozbiljnih oštećenja osetljivih područja.
- Kada završite sa irigacijom vaših zuba, slobodnom rukom pritisnite 0/1 prekidač.
- Uklonite nastavak pritiskajući dugme na ručici i izvlačeći prskalicu iz ručice irigatora. Stavite ručicu na mesto predviđeno za to. Isključite aparat kad nije u upotrebi.

waterpik Waterflosser Model Ultra WF-100 / WF-112

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


1 Priprema rezervoara

Odvijte rezervoar od baze i napunite vodom sobne temperature.

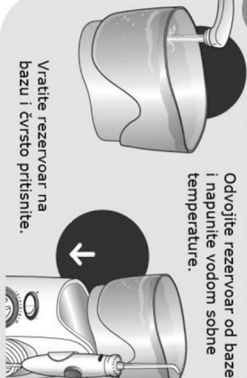

Vratite rezervoar na bazu i čvrsto pritisnite.

2 Postavljanje nastavka

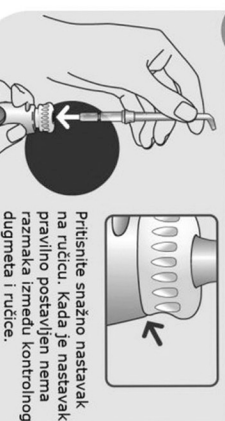

Pritisnite snažno nastavak na ručici. Kada je nastavak pravilno postavljen nema razmaka između kontrolnog dugmeta i ručice.

3 Prva upotreba

Pre prvog korišćenja uređaja: Podesite pritisak na najveću brzinu, uperite ručicu i nagните u lavabo, zatim uključite.



4 Podesavanje pritiska i pauza

Možete trenutno zaustaviti vodu pritiskom dugmeta na ručici. Postepeno pojačavajte do željenog pritiska.



5 Korišćenje Waterpik aparata

Uvek držite nastavak u ustima pre uključivanja.

Nagните se nad umivaonik i zatvorite usne dovoljno da sprečite prskanje, a da ujedno ispušate vodu iz usta u umivaonik.




Nastavak postavite iznad desni pod uglom od 90°

Počnite od zadnjih zuba, pratite desni prema napred, praveci kratke pauze na prostoru između zuba. Nastavite sa čišćenjem dok svi delovi oko i između zuba ne budu očišćeni.

6 Uklanjanje nastavka

Pritisnite malo dugme na ručici. Kontrolno dugme će iskočiti i osloboditi nastavak. **Upozorenje:** Ne pritiskajte dugme dok aparat radi.

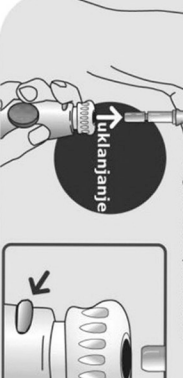

Uvoznik i distributer



LAVIEFARM

Laviefarm d.o.o. Zmajanska 41, 11000 Beograd
tel: 011 786 3440, 011 744 0646, Fax: 782 3133
www.waterpik.rs