

IZJAVA O SAOBRAZNOСТИ

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate korisnička uputstva koja su priložena uz proizvod, kao i da se pridržavate navedenih preporuka.

Waterpik Inc tvrdi da ovaj proizvod nema mane u materijalu i načinu sklapanja u roku od 2 godine od datuma nabavke, ukoliko proizvod nije nepravilno upotrebljen ili fizički oštećen posle nabavke.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe nezatna. Proizvod koji ne bude popravljn u propisanom roku na vaš zahtev zamenićemo novim. Za vreme popravke aparata produžuje se rok saobraznosti za period od dana prijave kvara do dana popravke.

POSTUPAK REKLAMACIJE:

Ako proizvod koji ste kupili nije saobrazan Ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste proizvod kupili. Prodavac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Odgovor prodavca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti je moguće opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Saobraznost prestaje da važi u sledećim slučajevima:

- nepoštovanja uputstva za upotrebu,
- nepravilna upotreba i održavanja aparata,
- oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika ili oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem,
- popravke koju je izvršila neovlašćena osoba,
- ugradnja neoriginalnih rezervnih delova,
- nemarnog rukovanja aparatom koje ima za posledicu mehanička ili estetska oštećenja,
- oštećenja nastala zbog mehaničkih udara od strane kupca ili treće osobe,
- grešaka koje su posledica smetnji iz okoline (udar грома, električne struje, poplave i sl.).

RECIKLAŽA



- Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

SADRŽI LITIJUM-IONSKU PUNJIVU ČELIJU. MORA SE PRAVILNO RECIKLIRATI ILI ODLAGATI. Ugrađenu punjivu bateriju mora da ukloni kvalifikovano stručno lice prilikom odbacivanja proizvoda.

Ekskluzivni distributer za Srbiju: LAVIEFARM DOO, ul. Zrmanjska 41, 11 000 Beograd

tel: +381 11 744 0646, +381 11 744 0698; fax: +381 11 782 3133

e-mail: info@waterpik.rs

Sertifikati usaglašenosti: www.waterpik.rs/dokumenti



Datum kupovine: _____

Waterpik® ION Cordless Water Flosser


Model WF-11

KARAKTERISTIKE

- 6 nastavaka za ispiranje;
- rezervoar sa kapacitetom 90 sekundi rada;
- praktični magnetni sistem na ručici;
- napredni sistem prilagodavanja nivoa pritiska sa 10 jačina mlaza;
- dugme on/off na ručici;
- 1-minutni tajmer koji signalizira na 30 sekundi da treba preći na čišćenje druge polovinu vilice;
- mogućnost rotriranja cevčice za 360°;
- Napredna litijum-ionska baterija sa USB adapterom obezbeđuje do 4 nedelje korišćenja po jednom punjenju;
- Globalni napon.

NASTAVCI

- A ortodontski nastavak za fiksne proteze
- B Nastavak za perodontalne džepove
- C Nastavak za uklanjanje plaka - za krunice, implantate, mostove
- D Klasičan nastavak
- E Nastavak za implantate
- F Nastavak za uklanjanje naslaga sa jezika

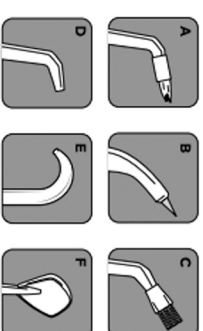


Nastavke je potrebno zameniti na 3-6 meseci

SPECIFIKACIJA

- Pritisak: 0,689 do 6,895 bar
- Impulsa u minuti: 1300
- Nivoa podešavanja pritiska: 10
- Kapacitet rezervoara: 651 ml
- Dimenzije uređaja: 19,30 cm x 15,75 x 15,49 cm
- Težina uređaja: 0,590 kg
- Garancija: 2 god.

1. Dugme za uključivanje/isključivanje uređaja
2. Ručica
3. Dugme za uključivanje/isključivanje vode
4. Točtic za kontrolu jačine vodenog pritiska
5. Magnetni držač ručice
6. Cev za vodu
7. Nastavak
8. Rotirajući vrh
9. Poklopac rezervoara
10. Rezervoar
11. Dugme za izbacivanje nastavka
12. Kontakt za punjač
13. Baza aparata
14. USB kabl za punjenje

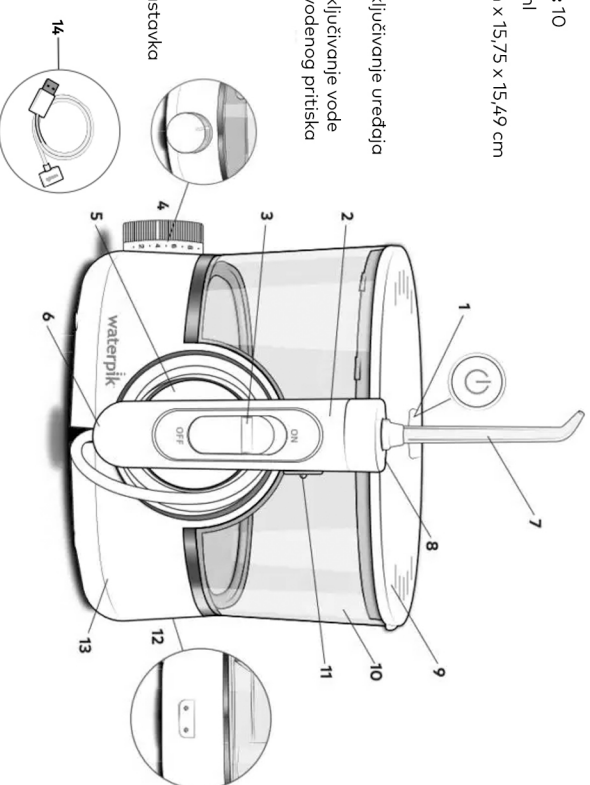

UPUTSTVO ZA UPOTREBU APARATA Waterpik Cordless ION Water Flosser WF-11

Waterpik Cordless ION bežični oralni tuš klinički je testiran i dokazano je da je ovaj proizvod neprevaziđen u svojoj sposobnosti da masira desni i čisti teško dostupna mesta u usnama. Takođe je naučno dokazano da pomaže održavanju zdravlja vaših zuba i desni i smanjuje bakterije iz onih delova usta koja normalno pranje i drugo čišćenje ne može da dosegne.

- Upotrebljavajte ovaj proizvod samo kako je naznačeno u ovom uputstvu i preporuci od vašeg stomatologa.
- Ako vam je vaš doktor ili kardiolog savetovao da uzimate antibiotike pre zubnog tretmana, konsultujte vašeg stomatologa pre upotrebe ovog uređaja.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su dobili nadzor ili uputstva vezi sa korišćenjem uređaja od strane lica odgovornih za njihovu bezbednost.
- Uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8+ godina, uz preporuku stomatologa.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

VAŽNO - PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE KORIŠĆENJA.

Ovaj proizvod je za upotrebu u domaćinstvu.
Kada koristite električne proizvode, posebno kada su deca prisutna, zbog bezbednosti uvek treba poštovati mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

UPOZORENJE:

Da biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili povrede:

- Proverite da li je kabl punjača oštećen pre prve upotrebe i tokom životnog veka proizvoda.
- Nemojte rukovati USB punjačem koji je isporučio prodavac mokrim rukama.
- Nemojte stavljati niti ispuštati USB punjač koji je isporučio prodavac u vodu ili drugu tečnost.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod tokom kupanja.
- Nemojte postavljati niti skladištiti ovaj proizvod tamo gde može da padne ili da se uvuče u kadu ili lavabo.
- Ne uključujte ovaj uređaj u sistem napona koji se razlikuje od naponskog sistema navedeno na uređaju ili punjaču. Korišćenje sa neodgovarajućim naponom će oštetiti proizvod i PONISTITI garanciju.
- Ne usmeravajte vodu ispod jezika, u uho, nos ili druga osetljiva područja. Ovaj proizvod je sposoban za proizvodnju pritiska koji može izazvati ozbiljnu štetu na ovim delikatnim područjima i sluzokoži.
- Nemojte ispuštati ili umerati bilo kakav strani predmet u bilo koji otvor aparata.
- Držite USB punjač dalje od zagrejanog površine.
- Koristite samo preporučene savete za korišćenje i dodatke za uređaj koje je napravio Waterpik Inc.
- Nemojte koristiti pod ili koncentrisana eterična ulja u ovom proizvodu jer njihova upotreba može smanjiti performanse uređaja i skratiti vek trajanja proizvoda. Upotreba ovih proizvoda mogu PONISTITI garanciju.
- U rezervoar uređaja sipajte isključivo vodu.
- Uklonite sav oralni nakit pre upotrebe ovog proizvoda.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj ako imate otvorenu ranu na vašem jeziku ili u usnama.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod duže od 5 minuta u svakom dvočasovnom periodu.
- Baterija aparata se ne može zameniti. Ako je USB punjač oštećen nemojte ga koristiti
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen.

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Napunite rezervoar rastvorom vode i alkohalnog sirćeta (10:1), ostavite rashor da stoji u rezervoaru 10ak minuta a zatim usmerite aparat sa nastavkom u umivaonik, uključite aparat i pustite da sva voda iz rezervoara iscuri. Ovo će ukloniti tragove kameca i omogućiti dug životni vek aparata. Ovaj proces treba ponoviti svakih 1-3 meseca.

- Rezervoar za vodu se može ukloniti radi lakšeg čišćenja. Preporučuje se čišćenje rezervoara jednom nedeljno.
- Uklonite nastavak sa ručice i stavite ga u mesto za čuvanje. Koristeći meku krpu i neabrazivni čistač, očistite aparat kad je potrebno.
- Pre čišćenja, isključite aparat sa punjača.
- Ispraznite rezervoar dok ne bude potpuno prazan, pre nego ga izložite niskim temperaturama.

INSTRUKCIJE ZA RUKOVANJE






Waterpik Cordless ION oralni tuš je model aparata koji radi na baterije. Za punjenje ovog proizvoda potreban je USB punjač koji je isporučio prodavac sa sledećim specifikacijama: USB tip-A, izlaz: 5.0 VDC, 1.0 A.

ODRŽAVANJE I ODLAGANJE BATERIJE

- Uređaj se neće puniti ako je prekidač u položaju ON (I).
- Ako koristite uređaj jednom dnevno ili ređe, preporučuje se da ga punite preko noći, jednom nedeljno.
- Ako ga koristite dva puta dnevno ili više, punite uređaj češće.
- Nemojte potpuno isprazniti baterije jer to može skratiti životni vek baterija i zahtevace punjenje jedinice u trajanju od 24 sata da bi se dobilo potpuno punjenje.
- Ako se aparat ne koristi ili odlaze na duži vremenski period (šest meseci ili više), obavezno je potpuno napuniti bateriju pre skladištenja.
- Aparat sadrži litijum-jonsku
- Baterija nije zamenljiva.

SERVIS

Električni deo Waterpik uređaja, može se servisirati samo kod ovlašćenog servisa i preko distributera, kućne popravke nisu moguće.
U slučaju da aparat ne radi ili loše funkcioniše, vratite ga prodavcu, na prodajnom mestu gde ste kupili proizvod.

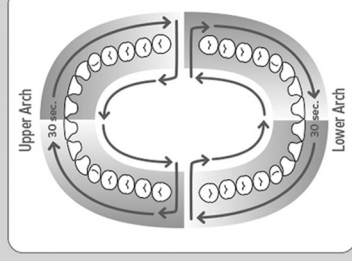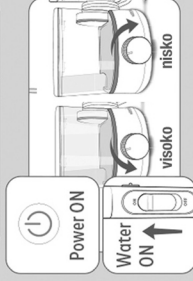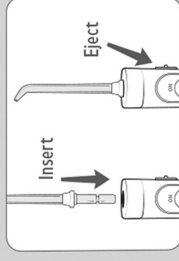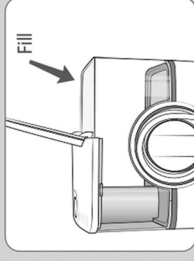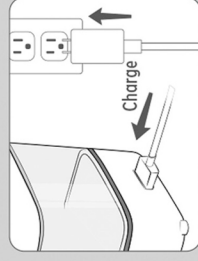

PUNJENJE BATERIJE UREĐAJA

Za punjenje ovog proizvoda potreban je USB punjač koji je isporučio prodavac sa sledećim specifikacijama: USB tip-A, nazivni izlaz: 5.0 VDC, 1.0 A.

Uverite se da su kontakti i na kابلu i na uređaju čisti i suvi pre povezivanja punjača. Uključite USB punjač u zidnu utičnicu i povežite kabl magnetnog punjača sa uređajem. Indikator punjenja na uređaju će svetleti tokom punjenja, a zatim će početi da treperi na trenutak svake 3 sekunde kada je uređaj potpuno napunjen. Potpuno napunjena baterija će trajati oko 4 nedelje kada se uređaj koristi jednom dnevno / jedan minut dnevno. Kada je bateriji potrebno punjenje (preostalo je otprilike 30% napunjenosti), indikatorna lampica će treptati 3 puta, brzo kako bi označila da korisnik treba da razmisli o ponovnom punjenju jedinice. Potpuno punjenje će trajati 4,5-5 sati. Ako koristite uređaj jednom dnevno ili manje, preporučuje se da ga punite svake 3-4 nedelje. Ako ga koristite dva puta dnevno ili više, punite uređaj češće.

Priprema rezervoara

Uklonite rezervoar, podignite poklopac rezervoara i napunite mlakom vodom. Vratite rezervoar preko baze i čvrsto pritisnite i zatvorite poklopac.

Saveti za umetanje i uklanjanje nastavaka

Umetnite dno nastavka u sredinu ručice za vodu, čvrsto pritisajući dok nastavak ne sklopcne na svoje mesto. Obojeni prsten će biti u ravni sa vrhom ručice ako je nastavak pravilno postavljen na mesto. Da biste uklonili nastavak sa ručice, pomerite dugme za izbacivanje nastavka na vrhu ručice.

Glavna jedinica (samo prva upotreba)

Postavite kontrolu pritiska na bazi na visoko (podešavanje pritiska br. 10), usmerite ručicu za nastavkom u lavabo. Uključite dukme ON dok voda ne poteče sa vrha.

Podešavanje vodenog pritiska

Dugme za kontrolu pritiska nalazi se na dnu uređaja. Podesite na najnižu postavku (podešavanje pritiska br. 1) za prvu upotrebu. Postepeno povećavajte pritisak tokom vremena do podešavanja koje želite – ili prema uputstvima vašeg stomatologa.

NAPOMENA

Uvek stavite nastavak u usta pre nego što uključite dugme ON na uređaju. Nagnite se preko lavaboa i lagano zatvorite usne dovoljno da sprečite prskanje, dok i dalje dozvoljavate da voda curi iz usta u lavabo. Uključite prekidač za vodu. Kada završite, okrenite prekidač za vodu i isključite napajanje. Tokom upotrebe možete zaustaviti protok vode pomeranjem prekidača za vodu na ručki u položaj OFF. Sa prekidačem za vodu u položaju OFF, uključite napajanje.

Za najbolje rezultate počnite sa zadnjim zubima i idite ka prednjim zubima.

Direktan

Mlaz vode bi tebao da bude pod uglom od 90 stepeni u odnosu na liniju desni sa vrhom u usnama. Klizite vrhom duž linije desni i nakratko zaстанite između zuba.

Nastavite dok ne očistite unutrašnjost i spoljašnjost gornjih i donjih zuba.

Tajmer od jednog minuta

Uređaj će napraviti kratku pauzu posle 30 sekundi, kako bi vas podsetio da predete na drugi svod vaših usta i još jednu kratku pauzu posle 1 minuta da signalizira da ste dostigli preporučeno vreme čišćenja. Uređaj će nastaviti da radi bez pauza dok se uređaj ne isključi. U zavisnosti od podešavanja pritiska, malo vode će ostati u rezervoaru nakon 1 minuta.

Kad završite

Isključite napajanje. Ispraznite svu tečnost koja je ostala u rezervoaru.